

MAJOR[®] PRODUCTS

For Basic Equipment in Lab.




A Leading in Laboratory Equipments



www.major-lab.com (e-mail: major@major-lab.com)


ตู้ดูดควันพิษชนิดใช้ท่อ Fume Hood/ Fume Cupboard

ผลิตภัณฑ์ตู้ดูดควันพิษ ภายใต้ชื่อ Major Products ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน จนเป็นต้นแบบตู้ดูดควันในประเทศไทยด้วยการออกแบบที่อ้างอิงการระบายอากาศแบบ Automatic by Pass ในรุ่น Super Flow สำหรับรุ่นล่าสุด Discovery ใช้ระบบการทำงานแบบไมโครโปรเซสเซอร์ และมีการออกแบบชุดเขยอากาศเป็นชนิด Under working area pass เพื่อการรักษาระดับความเร็วลมหน้าตู้ไม่ให้แปรปรวนตามระดับความสูงของการเปิดกระจกหน้าตู้ มีการติดตั้งเดินท่อระบายควันด้วยท่อไฟเบอร์กลาส ระบบ Filament Winding นอกจากนี้ยังมีตู้ระบายควันขนาดเล็กสำหรับการใช้งานปริมาณน้อย ราคาประหยัด

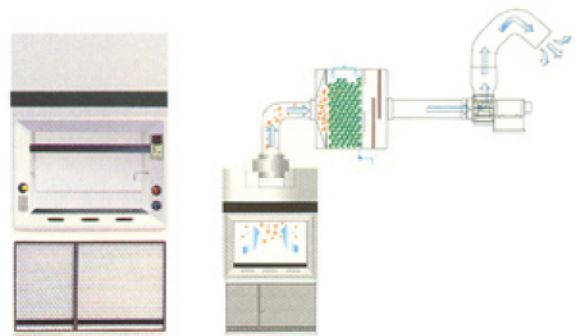


ระบบกำจัดไอสารเคมี Fume Scrubber

ด้วยความเป็นห่วงใยต่อสภาพแวดล้อม ทางบริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด ได้ออกแบบพร้อมบริการติดตั้งระบบกำจัดไอสารเคมี ที่ถูกกำจัดออกมาจาก Fume Hood มีทั้งชนิด Wet Scrubber ที่ใช้น้ำเป็นตัวกำจัดไอกรดต่าง ด้วยการละลายหรือเป็นระบบ Neutral Scrubber ที่ต้องการใช้สารเคมีเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาจนเป็นกลาง ในส่วนของไอ Solvent ที่มีกลิ่นรุนแรงแต่ไม่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำทางบริษัทฯ มีระบบคาร์บอน (Carbon Filter)

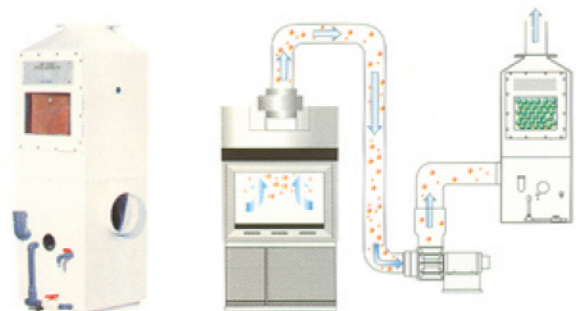

ตู้ดูดควันพิษคุณภาพอันดับหนึ่งของโลก Fume Hood : WALDNER

ตู้ดูดควันที่มีนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่คิดค้นโดยบริษัท WALDNER จากประเทศเยอรมัน ภายใต้ชื่อรุ่น Secuflow เป็นการออกแบบตู้ดูดควันที่เน้นประสิทธิภาพของการกำจัดไอสารเคมีที่ต้องได้ผล 100 % โดยมีให้ มีสารเคมีหลงเหลือตกค้างอยู่ภายในพื้นที่ใช้งาน รวมถึงการประหยัดพลังงานสูงสุด ด้วยการเพิ่มระบบ Air Supportive ช่วยให้ไอสารเคมีไหลเคลื่อนเป็นแนวเรียบ จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดให้มีความเร็วลมหน้าตู้ 100 ฟุต/นาที่ แต่ใช้หลักการกำจัดอากาศให้ได้ปริมาณตามกำหนดแทน ทางบริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด ได้รับการไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

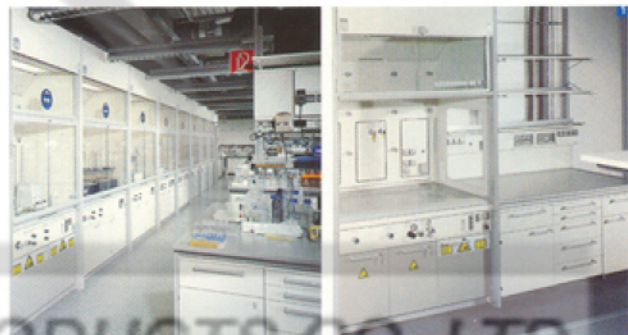

ตู้ดูดควันพิษชนิดไร้ท่อ Ductless Fume Cupboard

ตู้ดูดควันพิษสำหรับห้องปฏิบัติการทุกประเภท ที่มีการใช้งานตู้ดูดควันไม่มากนัก หรือใช้งานกับสารที่เป็นไอสารละลายเป็นส่วนใหญ่ต้องการตู้ดูดควันที่มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย Major Products มีตู้ดูดควันชนิดไร้ท่อ โดยการเก็บไอสารพิษด้วยคาร์บอนฟิลเตอร์ ที่มีคุณภาพสูง สามารถเก็บได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้สูง



ตู้เก็บสารเคมี Chemical Storage

ภายใต้ชื่อ Max-C เป็นตู้เก็บสารเคมีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง สำหรับห้องปฏิบัติการยุคใหม่ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง สามารถจัดเก็บสารเคมีจำพวก Leak Chemical มีให้เลือกทั้งประเภทใช้ท่อ และระบบกรองด้วยคาร์บอนฟิลเตอร์คุณภาพสูง เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ และมีอุปกรณ์เสริมมาตรฐานเป็นระบบกวนชนิดแห้งแม่เหล็กเพื่อการทดลองที่ใช้ปฏิกิริยายาวนาน



เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ Laboratory Furniture : WALDNER

ภายใต้ประสบการณ์อันยาวนานในการออกแบบห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และอื่น ๆ ทุกประเภทจึงทราบปัญหาในการวางระบบห้องปฏิบัติการอย่างดี บริษัท WALDNER จากประเทศเยอรมัน ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ล่าสุด ด้วยแนวคิดการประหยัดพื้นที่ใช้สอย และการปรับเปลี่ยนห้องปฏิบัติการได้ทุกเมื่อ เพื่อรองรับรูปแบบของการทดลองใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมี เฟอร์นิเจอร์ ห้องปฏิบัติการที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ภายใต้ชื่อ M-LAB ที่ ทางบริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขาย พร้อมระบบท่อน้ำ ท่อแก๊สและระบบน้ำทิ้ง ครบวงจร



ก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊ส Water Gas Outlets

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊ส ทางวิทยาศาสตร์รายแรก ๆ ของประเทศ มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ มีให้เลือกทั้งชนิด Ceramic Valve, Screw Fitting Valve และ Ball Valve Brass มีการออกแบบ Outlet สำหรับน้ำร้อน น้ำเย็น หรือน้ำ Deionize ทำด้วย UPVC มีการผลิตก๊อกแก๊ส สำหรับ LPG และ HPG ทุกประเภท นอกจากนี้ยังรับสั่งอุปกรณ์ Outlet จากต่างประเทศ ทุกยี่ห้อ อาทิ Broen, Vultex, Mark Lab




อ่างน้ำและอุปกรณ์น้ำทั้ง Sink and Drainage Accessories

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตอ่างน้ำไฟเบอร์กลาส และอ่างสแตนเลส มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ ขนาดตามความต้องการรวมถึงอ่างสำเร็จรูปจากต่างประเทศทำด้วย Polypropylene (PP) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ทำด้วยวัสดุ PP ทั้งหมด เช่น สะดืออ่าง ตัวดักกลิ่นตะกอน จุกปิดอ่าง ท่อน้ำล้น และอื่น ๆ ครบทุกชนิด




แผ่นปูโต๊ะ อีพ็อกซี่ และแผ่นซิเรนา Epoxy and Sirena Work Top

แผ่นปูโต๊ะ Epoxy Resin ชนิด Compact มีความทนต่อความกัดกร่อนสูง ไม่ร้อนหรือแตกกลายงา ผลิตขึ้นในประเทศเพียงรายเดียว โดยการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ สามารถสั่งทำตามขนาดและความหนาที่ต้องการใช้ ราคาประหยัด ลดการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป สามารถนำไปใช้ปูโต๊ะปฏิบัติการ โต๊ะเครื่องชั่ง และตู้ระบายน้ได้ดี

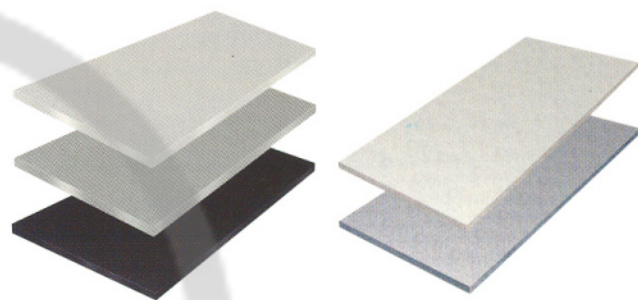

ที่แขวนเครื่องแก้ว ทุกประเภท Pegboards

ที่แขวนเครื่องแก้วสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำด้วยวัสดุทนเคมี PVC หรือ PP ทางบริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก-โปรดักส์ จำกัด ได้เป็นผู้ผลิตที่แขวนเครื่องแก้วชนิดเป่าแห้ง Pegboard with Heater เพื่อเป็นการประหยัดการใช้ตู้อบในการอบเครื่องแก้วในห้องทดลอง และสามารถจัดเก็บเครื่องแก้วหลังจากการใช้งานอย่างรวดเร็ว การทำงานพร้อมติดตั้งเวลา นอกจากนี้ยังรับทำที่แขวนเครื่องแก้วตามขนาดที่ต้องการ

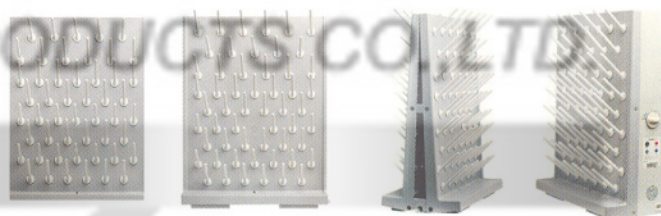


ชุดล้างตา/ ล้างตัวแบบปัจจุบันทันด่วน Emergency Eyewash & Shower

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตชุดล้างตาและล้างตัวแบบปัจจุบันทันด่วน (Emergency Eyewash & Shower) โดยออกแบบสำหรับห้องปฏิบัติการทางเคมีโดยเฉพาะ ทำด้วยสแตนเลสสตีล ทั้งชุด ตัวอ่างรองน้ำและผ้าห่อหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส มีแบบให้เลือกหลากหลาย บริการติดตั้ง พร้อมเพิ่มแรงดันน้ำ การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน



โต๊ะวางเครื่องชั่ง Balance Table

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตโต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่ง แบบมาตรฐานโดยเฉพาะ สำหรับงานที่ต้องการค่าละเอียดของท่อนิยม โต๊ะวางเครื่องชั่งได้รับการออกแบบให้ป้องกันการสั่นสะเทือนจากภายนอก โดยดูดซับแรงจาก Silica Media และโต๊ะสามารถปรับระดับได้ทุกทิศทาง มีแบบโต๊ะให้เลือกหลายขนาดพร้อมวัสดุปิดผิวป้องกันความชื้น การเหนี่ยวนำไฟฟ้า และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

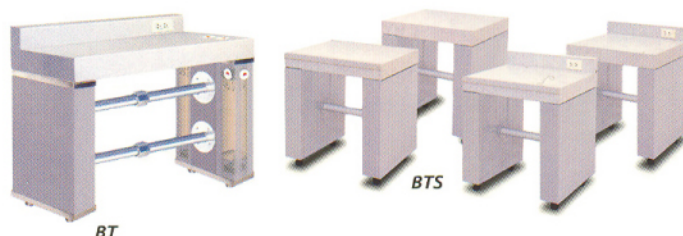

ตู้เชื้อเชื้อ/ ตู้ปลอดเชื้อ Clean Bench : Clean Line

ประสบการณ์ในการผลิตตู้เชื้อเชื้อ ทำให้มีการออกแบบการติดตั้งระบบตรวจเช็คความเร็วลมและความดันบรรยากาศเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน จะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบถึงประสิทธิภาพของแผ่นกรอง HEPA Filter รวมถึงการเพิ่มอุปกรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตู้เชื้อเชื้อ เช่น อุปกรณ์ช่วยการรวมตัวของ Particle ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อลดปริมาณเชื้อขนาดเล็ก เช่น ไวรัส ไม่ให้ปนเปื้อนการทดลอง อุปกรณ์กำจัดกลิ่น ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ตู้เชื้อเชื้อของบริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด มีให้เลือกแบบมาตรฐานในรุ่น Horizontal Vertical และ Bio-Hazard นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้นำตู้เชื้อเชื้อจากต่างประเทศ ในรุ่น Bio-Hazard ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

ตู้อบ/ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Oven and Incubator : DAIKI

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายตู้อบและอินคิวเบเตอร์ทุกประเภท ตั้งแต่ Dry Oven 200°C, 250°C, Explosive Proof Oven, Mini Incubator, Low Temp Incubator, Mini Carbondioxide Incubator, Vibration Incubator, Hybridization Incubator, Multi-Room Incubator, Clean Air Oven และ UV Sterilizer มีให้เลือกในหลายช่วงอุณหภูมิและขนาดตามการใช้งาน

เครื่องกวนสารเคมีชนิดแท่งแม่เหล็ก/ เตาไฟฟ้า Magnetic Stirrer/ Hot Plate

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้นำเข้า Hot Plate Stirrer และ 4 Position Stirrer คุณภาพสูงจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตเครื่องกวนสารชนิดแท่งแม่เหล็ก และเตาไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงแต่ราคาประหยัด มีให้เลือกหลายขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน สำหรับภาชนะบรรจุ 600 ml. ถึง 3,000 ml. มีจอแสดงค่าแบบ LED สามารถปรับความเร็วรอบตามที่ต้องการ มีรุ่นพิเศษที่มีปุ่มสั่งการทำงานอัตโนมัติที่ 100°C เพื่อความประหยัดสูงสุด

แท่งกวนแม่เหล็ก Magnetic Bar

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าแท่งกวนแม่เหล็กที่ใช้ร่วมกับ Magnetic Stirrer รายใหญ่ โดยมีสินค้าในสต็อกสำหรับรุ่นที่ใช้กันทั่วไป โดยมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก Mini spin bar ไปจนถึงขนาดใหญ่ Giant spin bar และรับสั่ง แท่งกวนแม่เหล็ก ที่มีลักษณะพิเศษแบบต่างๆ รวมถึงแท่งดึงแม่เหล็กด้วย (Retriever)

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Temperature and Humidity Chamber

สำหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องการควบคุมสภาวะของสิ่งแวดล้อม สำหรับการทดลองโดยสามารถควบคุมได้ทั้ง อุณหภูมิในช่วง 0-99°C และควบคุมความชื้น ในช่วง 0-99% RH โดยให้ค่าความเที่ยงตรงสูง บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากต่างประเทศ โดยมีราคาย่อมเยา สำหรับใช้ในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน Microbiology, Biology, Agriculture เป็นต้น

ตู้ควบคุมการเพาะพันธุ์พืช Growth Chamber

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด ได้นำเข้าตู้เพาะพันธุ์พืชหลากหลายชนิด โดยเน้นความแตกต่างของการทดลอง เช่น Growth Chamber ที่มีแสงสว่าง 1 ด้าน และ 3 ด้าน Co₂ Growth Chamber, Culture Chamber, Multi-room Chamber และ Dew Chamber ซึ่งจะครอบคลุมการทดลองทางด้านการเพาะพันธุ์พืชอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์ประกอบการใช้งานประกอบ ตามความต้องการของลูกค้า


ตะเกียงบุนเสนและตะเกียง Bunsen/ Automatic Bunsen

ตะเกียงบุนเสนของบริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด ได้รับการออกแบบให้มีความทนทานต่อการใช้งาน โดยไม่มีวัสดุที่เป็นยางมาเกี่ยวข้อง การออกแบบครอบคลุมทุกปัญหาของการใช้งาน สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย และประหยัด ด้วยการเปลี่ยนหัวตะเกียง เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของเปลวไฟได้ ตัวตะเกียงทำด้วยทองเหลืองเคลือบอีพ็อกซี และมีชนิดหัวตะเกียงเป็นสแตนเลสสตีล และขาตั้งสแตนเลส นอกจากนี้ยังมีตะเกียงแบบอัตโนมัติแบบต่างๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จำหน่ายในราคาย่อมเยา



อ่างควบคุมอุณหภูมิ Water bath/ Colling/ Shaker bath

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย อ่างควบคุมอุณหภูมิคุณภาพสูง มีให้เลือกหลายขนาดตามการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีให้เลือกทั้งที่มีระบบควบคุมภายในตัวอย่างและ แยกส่วนที่ต้องการตั้งอุณหภูมิแบบจุ่ม อ่างแบบมีช่องมองด้านเดียวและ สองด้าน มีอ่างให้สำหรับตัวกลางนำความร้อน ชนิดน้ำมัน Oli Bath, Shaker bath ในส่วนของตัวควบคุมอุณหภูมิ ใช้ระบบ PID ให้อุณหภูมิที่แม่นยำ และติดตั้งระบบ Pump เพื่อจ่ายของเหลวในอ่างไปหล่อเลี้ยง หรือไปให้อุณหภูมิกับอุปกรณ์ใช้งานอื่น ๆ

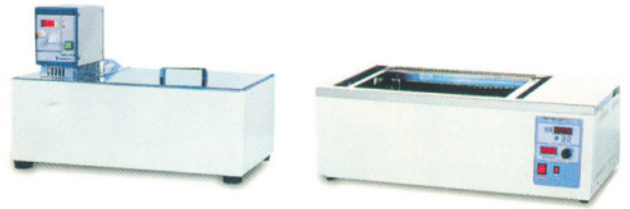


เครื่องเขย่า พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ Orbital Shaker/ Shaking Incubator

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด ได้นำเข้าเครื่องเขย่าระบบ Orbital ที่มีขนาด Platform ตั้งแต่ 300x300 mm. ไปจนถึง 530x480 mm. โดยวาง flask ขนาด 250 ml. ถึง 42 ใบ นอกจากนี้ยังมีเครื่องเขย่าระบบ Orbital ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 0°C จนถึง 60°C โดยมีอุปกรณ์ ประกอบระบบการใช้งานทุกประเภท เช่น Platform สำหรับ Flask ขนาด 100 ml., 250 ml., 500 ml., 1,000 ml., Spring Rack และ Microplate



ตู้ดูดความชื้น Desiccator

ตู้เก็บสารที่มีคุณสมบัติดูดซับความชื้น หรือ Desiccator เป็นความจำเป็นของทุกห้องปฏิบัติการทางบริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าตู้ดูดความชื้นทั้งระบบ Silica Gel และแบบ Automatic โดยมีแบบที่ทำจากวัสดุโลหะ อคริลิค และสแตนเลส มีให้เลือกหลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังมี Desiccator ชนิดโกลมทั้งพลาสติกและแก้ว สำหรับการใช้งานในสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยม และอุดมศึกษา

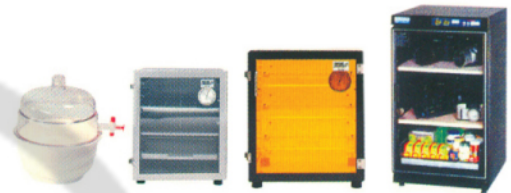

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสาร Concentrator & Centrifuge

ทางบริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องเพิ่มความเข้มข้นสาร โดยใช้ระบบปั่นเหวี่ยง Centrifuge พร้อมระบบการให้ความร้อน และระบบสุญญากาศทำให้ได้ตัวอย่างสารที่ต้องการโดยมีส่วนผสมของสารละลายน้อยที่สุดหรือไม่เลย การให้ความร้อนมี 2 ระบบด้วยระบบ Heater ที่ผนัง และระบบ Infrared ที่บริเวณฝ่าด้านบน ทำอุณหภูมิตั้งแต่ 5 องศาเหนืออุณหภูมิห้องจนถึง 70 องศาเซลเซียส โดยมีเครื่องดูดสุญญากาศติดตั้งอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบปั่นเหวี่ยงได้อย่างอิสระ



เครื่องกลั่นสารระเหยระบบสุญญากาศ Rotary Vacuum Evaporator

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกลั่นสารระเหยระบบสุญญากาศ หรือเรียกว่า Rotary Vacuum Evaporator โดยมีให้เลือกทั้งชนิดคอนเดนเซอร์ แนวตั้ง และแนวนอน ความจุในการระเหยตัวอย่างตั้งแต่ 50 100 250 500 มล. และ 1-2 ลิตร ไปจนถึง 50 ลิตร พร้อมอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ออกแบบโดยเฉพาะ Aspirator, Vacuum Controller, Cold Trap Bath, Cooling water Bath และอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องแก้วทุกชนิด รวมถึงอะไหล่การใช้งาน



เครื่องล้างทำความสะอาดชนิดอัลตราโซนิก Ultrasonic Cleaner

การทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในห้องทดลองที่มีขนาดเล็ก จะมีความยากลำบากในการทำ การทำความสะอาดเป็นอย่างมาก ทำให้เมื่อนำไปใช้งานครั้งต่อไปอาจเกิดความผิดพลาดของผลที่ได้ Ultrasonic Cleaner จะช่วยทำความสะอาดซอกเล็กซอกน้อยที่แปรงเข้าไปไม่ถึง มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการใช้งาน สามารถปรับระดับความแรง และ อุณหภูมิได้



ระบบเตรียมน้ำสะอาด ชนิด Reverse Osmosis และ Ultra Pure

ในปัจจุบันการวิเคราะห์ต้องการความละเอียดสูงมาก น้ำที่ใช้ในการทดลองมีความจำเป็นที่ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับงานทดลองนั้นๆ ระบบกรองน้ำทั่วไปและระบบกลั่นน้ำไม่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้จึงต้องใช้ระบบการกรองที่มีคุณภาพสูง สามารถให้ค่าการนำไฟฟ้า Conductivity ที่สูง ทางบริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด จึงนำเข้าเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงจากต่างประเทศที่สามารถให้ค่าแรงดันการนำไฟฟ้าที่ 25°C ถึง 18.2 / Megaohm-cm พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานที่ครบถ้วน



ฝ่ายติดตั้งและบริการลูกค้า (Customer Service)

ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลตู้ดูดควันพิษ (Fume Hood) และตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Air Flow) ทุกยี่ห้อ ทุกชนิดรวมถึง Canopy Hood และชุดตกไอกรด, สารเคมี ทั้งชนิดใช้น้ำและใช้ฟิลเตอร์ พร้อมบริการติดตั้งระบบน้ำดื่ม ระบบน้ำทิ้ง และระบบแก๊สทุกชนิด

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ จำกัด ได้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หือ Denver จากประเทศเยอรมัน โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อบริการหลังการขายที่รวดเร็ว พร้อมทั้งให้บริการตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ ทุกแบบทุกชนิด

เครื่องชั่ง Denver ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของส่วนรับน้ำหนัก (load cell) เป็นชนิด Monolithic Weighing system เพื่อการตอบสนองการอ่านค่าและแสดงผลการอ่านค่าที่รวดเร็วขึ้น และผลของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ไม่มีผลต่อเครื่อง เนื่องจาก load cell เป็น one material โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายดังนี้

Premium-Pinnacle Series

เครื่องชั่งชนิดอ่านละเอียดทศนิยมตั้งแต่ 1 ตำแหน่งจนถึง 5 ตำแหน่ง ด้วยโปรแกรมการทำงาน เช่น counting, +/- control, animal weighing, formulation, statistics พร้อมด้วยระบบ internal/external calibration และการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน interface ชนิด RS232C, USB และ LAN

Standard-TB Series

เครื่องชั่งอ่านละเอียดชนิด Analytical Balance สำหรับงานควบคุมคุณภาพหรืองานวิจัยที่ต้องการความละเอียดสูง ทศนิยม 1-4 ตำแหน่ง พร้อมระบบ internal calibration

Standard-T/TP Series

เครื่องชั่งอ่านละเอียดชนิด Analytical Balance สำหรับงานควบคุมคุณภาพ หรืองานวิจัยที่ต้องการความละเอียดสูง ทศนิยม 1-4 ตำแหน่ง พร้อมระบบ external calibration

Basic-MXX Series

เครื่องชั่งอ่านละเอียด ทศนิยมตั้งแต่ 1-3 ตำแหน่ง มีหน่วยน้ำหนักมาตรฐานถึง 13 หน่วย พร้อมโปรแกรมการใช้งาน counting, %weighing, formulation, static display จอแสดงผลแบบ back lighted display และค้อนน้ำหนักสำหรับ calibrate สามารถใช้แบตเตอรี่ชนิด 9V ได้อีกด้วย

Low cost-XP/DI Series

เครื่องชั่งชนิดเคลื่อนย้ายและใช้งานภาคสนามได้สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ และ power adapter ราคาประหยัด นอกจากนี้ยังมีเครื่อง printer และค้อนน้ำหนักมาตรฐานจำหน่ายอีกด้วย

Moisture Analyzer

เครื่องวัดความชื้นและชั่งน้ำหนัก พิกัดน้ำหนักตั้งแต่ 30 กรัม จนถึง 120 กรัม ความละเอียด 0.001 กรัม ความละเอียด 0.01 % ด้วยแหล่งให้ความร้อน ชนิด CQR quartz heater และ Iron rod ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

Electrochemistry

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH-meter) ชนิดเคลื่อนย้าย (UP-meter) และชนิดตั้งโต๊ะ (UB-meter และ 200-series) ด้วยประเภทของค่าการวัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น พร้อมทั้ง pH และ pH/ATC electrode, Ion selective electrode, Conductivity cells, Automatic Temperature Compensating Probe



Monolithic Weighing System

